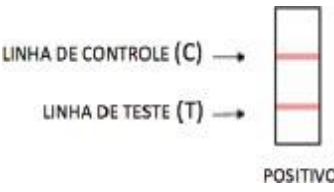

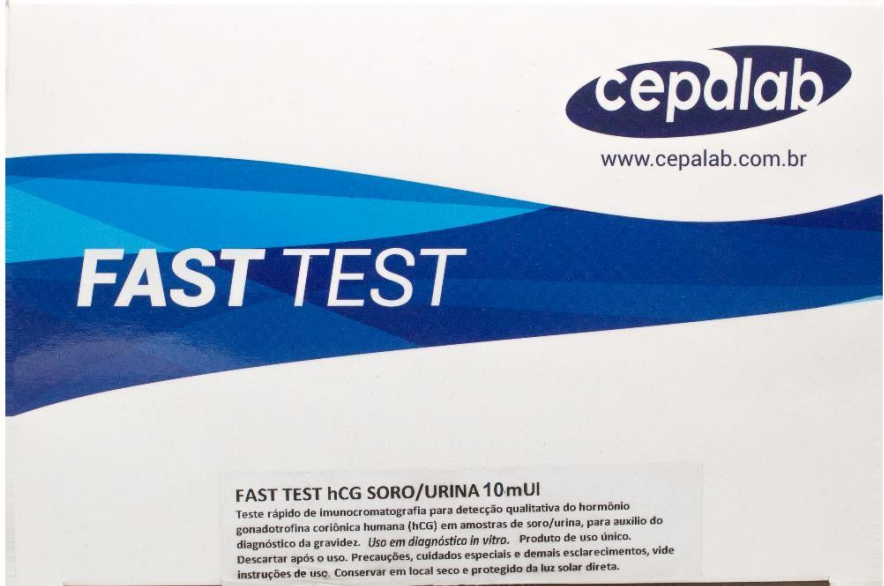
	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO			
	FAST TEST hCG SORO/URINA 10mUI			
	NCM	3002.15.90	Marca	CEPALAB
Validade	2 anos		Origem	China
Código do produto	055		Reg. MS nº	80258020032
Descrição	<p>Teste rápido de imunocromatografia para a detecção qualitativa do hormônio gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostras de soro/urina, para auxílio do diagnóstico da gravidez. Uso em diagnóstico in vitro.</p> <p>Se o resultado for positivo, duas linhas vermelhas aparecerão, uma linha na área de teste (T) e outra linha na área controle (C), nessa condição o hormônio hCG realizado indicativo da gravidez estará com a concentração igual a superior a 10mUI/mL. Um médico deverá ser consultado.</p> <p>Se o resultado for negativo, aparecerá uma linha vermelha apenas na área controle (C) indicando que o teste foi realizado corretamente.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>POSITIVO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>NEGATIVO</p> </div> </div> <p>Fast Test hCG soro/urina 10mUI é um teste imunocromatográfico, que identifica seletivamente o hCG (gonadotrofina coriônica humana) na amostra com sensibilidade de 10mUI/mL.</p>			
Imagens do produto				

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771

Finalidade de uso	Fast Test hCG soro/urina 10mUI é um teste imunocromatográfico para auxílio do diagnóstico da gravidez. Usado para determinação <i>in vitro</i> de hCG (gonadotrofina coriônica humana) em urina ou soro humano.		
Composição	100 unidades: tiras-teste 1 unidade: manual de instrução de uso		
Armazenagem e Transporte	Conservar na temperatura entre 4-30°C, em local seco, protegido do calor e da luz solar direta e lacrado. Não congelar. Válido por 24 meses (2 anos) após a data de fabricação, se mantidas estas condições de armazenamento.		
Embalagem	Caixa de papel cartão contendo 100 unidades de tiras-teste individualmente embaladas em envelope laminado. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 36/2015, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial	Caixa com 100 unidades de tiras-teste	Peso	100g
		Dimensões	18,0 x 12,0 x 6,6 cm